



NITROFORT BLU

GUANTI MONOUSO NITRILE NITROGEL TECHNOLOGY (7,0GR - FLEX 6 - 250 MINUTI)

+50% elastic no stress - dermoprotettivo senza acceleranti - 3 strati - heavy works - champion in protection



Scheda tecnica

AGG. 02/09/2025

VG VG-117-110

Descrizione

GUANTI MONOUSO NITRILE NITROGEL TECHNOLOGY (7,0GR - FLEX 6 - 250 MINUTI)

Codici - Taglie

Taglia	S	M	L	XL
Art.	010251	010252	010253	010254
EAN	8000697008817	8000697008824	8000697008831	8000697008855
ITF	08000697000323	08000697000330	08000697000347	08000697000354

Specifiche

Peso - Classe	(M) 7,5gr
Peso	(S) 6,8gr (M) 7,3gr (L) 7,8gr (XL) 8,4gr
Colore	azzurro
Altro	ambidestri
Finitura Est.	microgrip sulle dita e polimerizzato
Finitura int.	clorinato
Spessore Dita	0.15 mm tol +- 0.15 mm
Spessore Palmo	0.11 mm tol +- 0.02 mm
Spessore Polso	0.09 mm tol +- 0.02 mm
Lunghezza	240 mm
AQL	≤1.5

Dispositivo di Protezione Individuale

DPI cat. III

Reg. (UE) 2016/425 (DPI) - EN ISO 21420:2020 - EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Tipo B EN ISO 374-5:2016 + ISO 16604:2004 (Proc. B)

Per la protezione da sostanze chimiche, microorganismi e virus.



EN ISO 374-1:2016/Tipo B



EN ISO 374-5:2016



Sostanza	Permeazione	Degradazione (%)
K - Idrossido di sodio 40%	6	-5.9
T - Formaldeide 37%	6	-3.1
P - Perossido di idrogeno 30%	2	36.4

Per la verifica dei requisiti di sicurezza in ambito DPI si è proceduto all'esame UE del tipo (modulo B) presso SATRA Technology Europe Ltd.(2777)

Il DPI è soggetto alla procedura di valutazione della conformità al tipo basata sul controllo interno unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale ad intervalli casuali (modulo C2) sotto la sorveglianza dell'organismo notificato SATRA Technology Europe Ltd.(2777)

AGG. 02/09/2025 - PG 510

Dispositivo Medico

DM classe I

Reg. (UE) 2017/745 (MDR) - EN 455 1-2-3-4

Rep: 2344133

Per la prevenzione della contaminazione incrociata paziente/utilizzatore.

Idoneo per esame, esplorazione, medicazione e laboratorio.



Contatto Alimenti

Reg. (CE) 2023/2006 (GMP); Reg. (CE) 1935/2004; D.M. 21/3/73 e s.m.i.; DPR 777/82 e s.m.i.; D.Lgs. 108/92

Idoneo al contatto con alimenti secondo le seguenti indicazioni:



Classe Alimenti	Tempo (max)
Alcolici fino al 15%	≤ 10 minuti
Oleosi Grassi	≤ 30 minuti
Alimenti Secchi	≤ 30 minuti
Frutta/Ortaggi non pelati	≤ 30 minuti
Acidi	≤ 10 minuti

Il giudizio relativo agli ambiti di idoneità alimentare è stato ufficialmente certificato presso laboratori accreditati

Idoneo alla manipolazione di alimenti surgelati fino a -28 °C

Utilizzo

Prodotto monouso.

Non utilizzare se la confezione è danneggiata.

Leggere attentamente tutte le informazioni ed avvertenze prima dell'impiego del prodotto. Accertarsi che sia privo di difetti o imperfezioni e adatto all'uso previsto. Conservare la confezione per garantire la rintracciabilità delle informazioni relative al prodotto. Per informazioni o richieste rivolgersi a quality@brentasrl.com.

I valori di protezione chimica sono stati ottenuti in condizioni di laboratorio e non riflettono la durata effettiva della protezione nelle condizioni reali d'impiego che può diminuire nel caso i guanti siano danneggiati e/o usurati o se la sostanza viene utilizzata in una miscela. Per le sostanze corrosive, la degradazione può essere il fattore più importante da considerare nella scelta dei guanti protettivi. Il contatto con sostanze chimiche aggressive diverse da quelle certificate, va preventivamente valutato.

Dichiarazione di conformità disponibile sul sito www.brentasrl.com.



Sicurezza

Reg. (CE) 1907/2006 (REACH)

Eventuali sostanze SVHC entro i limiti di legge.


Allergeni:



Imballi e Pesì

	Conf	100 Pezzi	
	Netto gr		
	(S)	680	
	(M)	730	
	(L)	780	
	(XL)	840	
	Collo	10 Confezioni	
	Netto gr		
	(S)	6800	Lordo gr
	(M)	7300	(S) 7735
	(L)	7800	(M) 8235
	(XL)	8400	(L) 8735
			(XL) 9335

pesi toll 5%

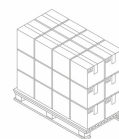

Pallet
9 x Strato
63 x Pallet
800 x 1200 x 1830 mm

Misure

Primario mm 120 x 70 x 230
Secondario mm 360 x 250 x 240

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore, raggi solari e/o UV.
Il prodotto deteriorato non rilascia sostanze nocive.



Smaltimento

Separa ove possibile le componenti principali dell'imballaggio ed il prodotto e conferiscile in modo corretto. Verifica le disposizioni del tuo comune.
Eventuali contatti con sostanze pericolose debbono essere considerati al momento dello smaltimento stesso. In questo caso smaltire in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili.

Confezione PAP 21 CARTA Raccolta differenziata
Prodotto Raccolta indifferenziata
Collo PAP 20 CARTA Raccolta differenziata

Note